


# SOLAR ELECTRONIC PERSONAL SCALE

USER GUIDE  
光动能电子人体秤  
使用说明书

±0®

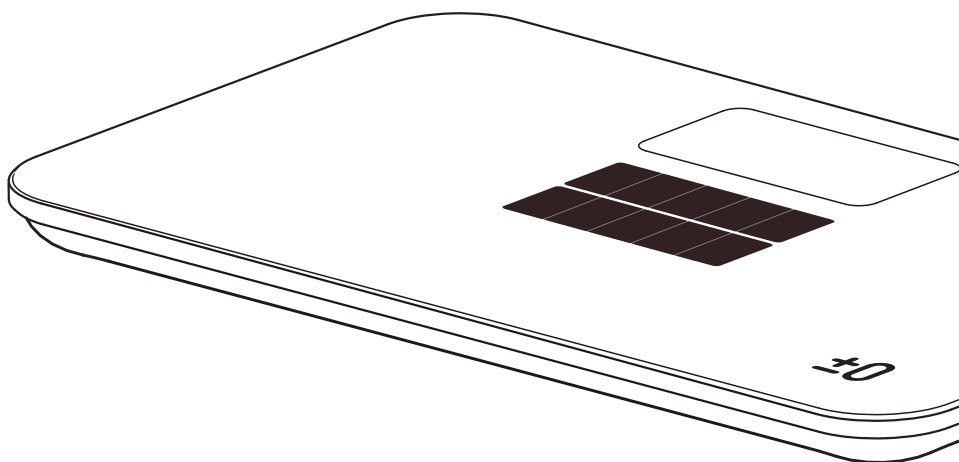

## 基本特性


采用高精度应变式传感器系统  
5mm钢化玻璃平台  
高清晰LCD显示  
最大称量: 150 kg / 330lb  
分度值: 0.1kg / 0.2lb

光动能电池供电 (光照强度大于100Lux可使用)  
智能压力开机  
超载提示 / 出错提示  
8秒内无操作自动关机  
单位转换: kg / lb

## 初次使用



光照一分钟左右开机全显

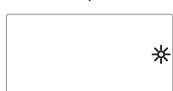


待机画面 (太阳符号闪烁)

- 初次使用时, 请将产品放置在光线充足的地方 (一般家庭的照明设备可达要求), 光动能电池受光照约一分钟后, 供电可达到正常使用值, 此时显示屏全显后太阳符号作闪烁显示, 表示电量充足可进行体重测量。
- 如将显示屏置于直接照射强阳光的地方 (阳台或窗口), 约 10 秒即可快速完成充电。

▲ 注: 在没有光照的情况下 (夜晚或置于暗处时), 光动能电池不能提供产品正常使用之能量, 需先用充足的光线照射光动能电池一分钟方可使用。

## 如何称重

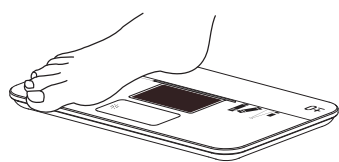

将秤体摆放于水平坚实的平面上 (秤体如放置不水平会导致称量不准, 如此时秤体因振动已开机, 请等待两秒后再开始称重)。

请平稳踏上秤面, 保持身体平衡, 使双脚平均分担体重。等您站稳后, 秤会显示您的体重。重量闪烁 2 次后自动锁定画面, 8 秒后自动关机。

屏幕显示:



秤体在待机画面时, 任何时候都能进行体重测量。无需为更换电池而烦恼。

## 功能展示

### 出错提示




**超载显示符号:**  
称量超出最大范围时显示 "Err"。



**状况显示符号:**  
开机不稳定时显示 "unst"。

### 单位转换

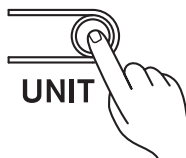

单位为: **kg - lb**

称重前请先设置好单位, 称重进行时不能进行单位转换。

## 注意事项

- 请勿在本产品上堆放重物。
- 本产品宜水平放置, 不宜竖直放置。
- 称重时请保持身体平稳, 尽量避免晃动身体。
- 所称物体请勿超过最大称量值, 过重可能会损坏产品传感器。
- 请勿使用化学溶剂擦拭本产品, 如需清洁请用沾水湿布擦拭, 秤体内部不能湿水。
- 为确保本产品的使用寿命, 请勿将本产品放置在过度湿热的环境中。
- 本产品只可做家庭称体重之用, 不得用于商业或其它用途。
- 本产品仅受静压力。非正常使用并受到撞击或跌落, 容易损坏本产品且造成危险。
- 基于技术持续改进, 产品外观或会更改, 请以实物为准, 更改内容恕不另行通知。

▲ 正常人一天中的体重会不断变化, 呼吸、心率、出汗、饮食等, 都会影响称量结果 (早上测量更接近我们的真实体重, 建议早上起床后测量体重)。