

## 基本特性

### 产品规格

- 配置高精度应变式传感器系统
- 高清晰彩色 LED 显示
- 独创“隐形脚垫”设计
- 最大秤量值：150kg
- 分度值：0.1kg
- 自动上秤开机
- 自动归零 / 自动关机
- 电压不足 / 超载提示
- 电源：4x1.5V AAA 电池（不附送）

### 注意事项

01. 本产品只可做家庭秤体重之用，不得用于商业或其它用途。
02. 如本产品不开机时无显示，请检查电池是否接触不良或需更换新电池。
03. 请使用同一规格的电池。
04. 请勿在本产品上堆放重物。
05. 宜水平放置本产品，不宜竖直放置。
06. 所称物体请勿超过最大秤量值，结果或会损坏产品传感器。
07. 为确保本产品的使用寿命，请勿将本产品放置在过度湿热的环境中。
08. 称重时要保持身体平稳，请勿晃动身体。
09. 请勿使用化学溶剂擦拭本产品，必要时用湿布擦秤，避免水进入秤内。
10. 本产品仅受静压力。非正常使用受到撞击或跌落，会损坏本产品且造成危险。

• 基于技术持续改进，产品外观或会更改，请以实物为准，更改内容恕不另行通知。



USER GUIDE

Portable personal scale // // // 使用说明书



YESHM  
Innovating Innovation \*\*\*

☎ 4000-888-522

CE RoHS




# Thank You!

感谢阁下的购买

为了正确使用本产品，请在使用前仔细阅读说明书。


## 如何称重

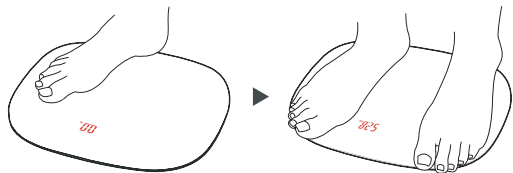

- 请装入电池，通电出现全显画面后自动关机，上秤归零进入称重模式。
- 请平稳踏上秤面，保持身体平衡，使双脚平均分担体重。重量闪烁2次后自动锁定画面，8秒后自动关机。再次称重时，在关机状态下可直接站上秤体，秤体会直接显示体重。

- 将秤体摆放于水平坚实的平面上(避免在地毯上使用)，秤体放置不平整会导致称量不准。
- 当称量出现偏差时，产品需进行自检（即秤体上不可有任何物体，将产品置于地面开机一次，让产品自动关机）为确保秤体在今后的使用过程中的准确性，建议每次移动秤体后都需进行自检。

## 按键功能

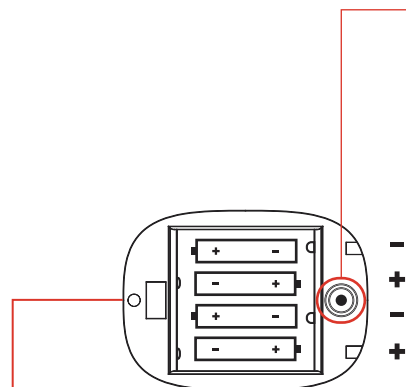

### 电池装拆

- 打开电池盖；
- 将4颗AAA电池按符号指示正确装进电池箱，安装时稍加力度往金属触点推压令电池进入凹槽；
- 更换新电池时，建议从中间的负极先取出一颗电池，然后再取余下电池。
- 装反电池极性，电池极性装反可能会对产品的电子部分造成永久损害。

UNIT 单位转换开关



### 单位转换

- 打开电池盖，单位转换键在右边。
- 按下“UNIT”键进行单位转换。  
单位依次为：kg - lb
- 称重前请先设置好单位，在称重时不能进行单位转换。

### 出错提示

Lo

#### 低电压显示符号

当电池电量不能维持正常工作时，显示屏会显示“Lo”，1秒后自动关机，出现低电符号时请及时更换新电池。

Err

#### 超载显示符号

当重量值超过超载值时显示屏会显示“Err”。