
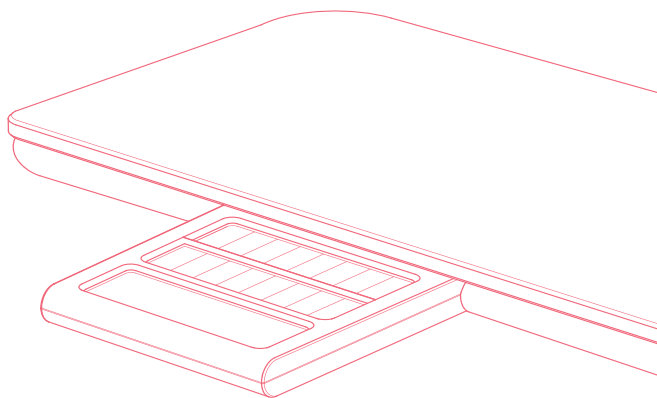


酷袋™ [太阳能] 电子人体秤 使用说明

YESHM®
Innovating Innovation >>>

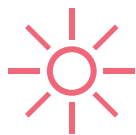

Thank You! 感谢阁下的购买。为了正确使用本产品，请在使用前仔细阅读说明书。

初次使用

- 初次使用时，请将产品显示屏拉出放置在光线充足的地方（一般家庭的照明设备可达要求），太阳能电池受光照约一分钟，供电可达到正常使用值，此时显示屏全显后太阳符号作闪烁显示，表示电量充足可进行体重测量。
- 如将显示屏置于直接照射强阳光的地方（阳台或窗口），10 秒即可快速完成充电。



光照一分钟左右开机全显




待机画面（太阳符号闪烁）

注：在没有光照的情况下（夜晚或置于暗处时），太阳能电池不能提供产品正常使用之能量，需先用充足的光线照射太阳能电池一分钟方可使用。

功能展示


能源收集

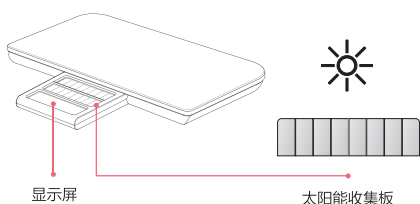

显示屏

太阳能收集板

单位转换

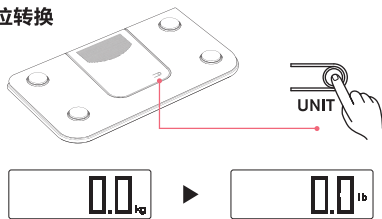

单位为：kg - lb

称重前请先设置好单位，称重进行时不能进行单位转换。

出错提示



超载显示符号：


称量超出最大范围时显示“Err”。




状况显示符号：

开机不稳定时显示“unSt”。


如何称重

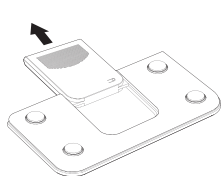

- 拉出显示屏后将秤体摆放在水平坚实的地面上。

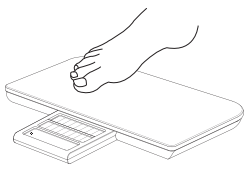

请平稳踏上秤面，保持身体平衡，使双脚平均分担体重。

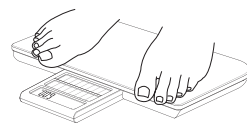

站稳后，秤会显示您的体重。重量闪烁 2 次后自动锁定画面，8 秒后自动关机。



- 秤体在待机画面时，任何时候都能进行体重测量。无需烦恼更换电池的问题。

基本特性

- 电源：太阳能电池供电（光照强度 200Lux 可使用）
- 采用高精度应变式传感器系统
- 最大称量：150 kg
- 最小称量：5 kg
- 开机重量：≥8Kg
- 负重量显示：-----
- 开机方式：免开机称重
- 自动关机时间：8 秒
- 自动零点追踪
- 二种单位转换：公制 Kg / 英制 LB
- 超载出错提示：Err

注意事项

- 避免损坏显示屏，拿取本产品时请勿将力量集中在显示屏的位置。
- 请勿在本产品上堆放重物。
- 本产品仅受静压力。非正常使用并受到撞击或跌落，容易损坏本产品且造成危险。
- 本产品宜水平放置，不宜竖直放置。
- 称重时请保持身体平稳，尽量避免晃动身体。
- 所称物体请勿超过最大秤量值，过重可能会损坏产品传感器。
- 请勿使用化学溶剂擦拭本产品，如需清洁请用沾水湿布擦拭，秤体内部不能湿水。
- 为确保本产品的使用寿命，请勿将本产品放置在过度湿热的环境中。
- 本产品只可做家庭称体重之用，不得用于商业或其它用途。
- 基于技术持续改进，产品外观或会更改，请以实物为准，更改内容恕不另行通知。