



USER GUIDE

电子人体秤 使用说明书

感谢阁下的购买。


为了正确使用本产品，请在使用前仔细阅读说明书。

☎ 4000-888-522

基本特性

- 配置高精度应变式传感器系统
- 6mm 钢化玻璃平台
- 高清晰红色LED显示
- 最大称量：200kg / 440lb
- 单位转换：公制 kg / 英制 lb
- 智能压力开机
- 电压不足提示
- 超载出错提示
- 自动关机 / 自动归零
- 电源：4 x 1.5V AA 电池（不附送）

如何称重

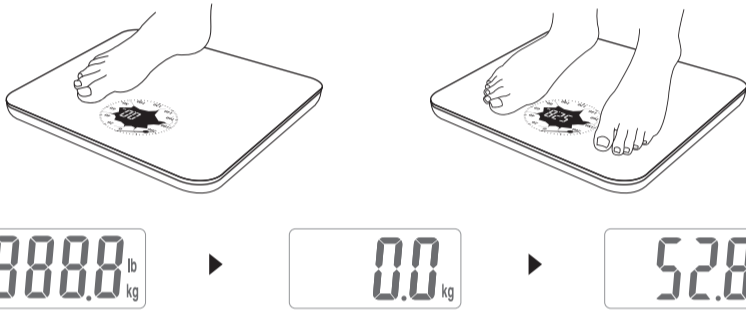

- 将秤体摆放于水平坚实的平面上。（秤体如放置不水平会导致称量不准。如此时秤体因振动已开机，请等待两秒后再开始称重。）
- 请平稳踏上秤面，保持身体平衡，使双脚平均分担体重。等您站稳后，秤会显示您的体重。重量闪烁 2 次后自动锁定画面，10 秒后自动关机。

注意 当称量出现偏差时，产品需进行自检（即秤体上不可有任何物品，将产品置于地面开机一次，让产品自动关机），为确保产品在今后的使用过程中保持准确性，建议每次移动后都进行自检。

当产品在手上显示 0.0 时放到水平面上会显示产品的自身重量，此时请勿站上秤台，待显示为 0.0 后再站上秤台称重（归零时间约为 2 秒）。

使用须知

出错提示

Lo 低电压显示符号
当电池电量不能维持本产品正常使用时，屏显“Lo”后自动关机，您需要更换新电池。

Err 超载显示符号
称量超出最大称量范围时，屏显“Err”。


---- 负重量显示符号
负重量时，屏显“----”。

unst 开机不稳定显示符号
当开机时秤体处于不稳定的状态时，屏显“unst”。



单位转换

- 单位依次为：kg - lb
- 按动“UNIT”键进行单位转换。称重前请先设置好单位，在称重时不能进行单位转换。

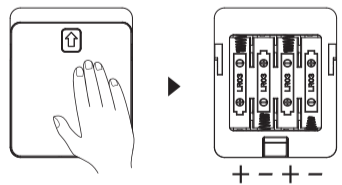

电池装拆

- 往箭头方向轻推电池门即可打开；
- 请按照电池箱里面的正负极符号安装 4 颗 AA 电池。（电池的极性装反可能会对本产品的电子部分造成永久损害）。

注意事项

- 请水平放置本产品。请勿在本产品上堆放物品。
- 称重时要保持身体平稳，请勿晃动身体。
- 本产品仅受静压力，请勿用力跳上秤体称重。
- 本产品仅适合家庭秤体重之用，不得用于商业或其它用途。
- 所称物体请勿超过最大称量值（200kg），以免损坏产品传感器。
- 请勿使用化学溶剂擦拭本产品，可用沾水湿布擦拭，秤内请勿进水。
- 为确保本产品的使用寿命，请勿将本产品放置在湿热的环境中。
- 如本产品在开机时无显示，请检查电池是否接触不良或需更换新电池。
- 非正常使用并受到撞击或跌落，容易损坏本产品且造成危险。
- 基于技术持续改进，产品外观或会更改，请以实物为准，更改内容恕不另行通知。