



USER GUIDE

太阳能电子人体秤使用说明书 - YHB1417

感谢阁下的购买。

为了正确使用本产品，请在使用前仔细阅读说明书。

基本特性

采用高精度应变式传感器系统
最大称量：200 kg / 440lb
单位转换：公制Kg / 英制Lb
同时兼容4 x 1.5V AA 电池（不附送）
太阳能电池供电（光照强度100Lux可使用）

6mm钢化玻璃平台
超大LCD显示（5.3"）
智能压力开机 / 超载出错提示
10秒内无操作自动关机
可在地毯上使用（附送地毯脚）

初次使用



光照一分钟左右开机全显




待机画面（太阳符号闪烁）

- 初次使用时，请将产品放置在光线充足的地方（一般家庭的照明设备可达要求），太阳能电池受光照约一分钟后，供电可达正常使用值，此时显示屏全显后太阳符号作闪烁显示，表示电量充足可进行体重测量。
- 如将显示屏置于直接照射强阳光的地方（阳台或窗口），约10秒即可快速完成充电。

▲注：在没有光照的情况下（夜晚或置于暗处时），太阳能电池不能提供产品正常使用之能量，需先用充足的光线照射太阳能电池一分钟方可使用。

如何称重

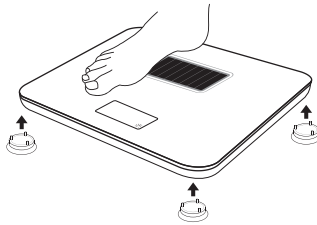

将秤体摆放于水平坚实的平面上。如需在地毯上称重，请安装地毯脚后使用（秤体如放置不水平会导致秤量不准，如此时秤体因振动已开机，请等待两秒后再开始称重）。

请平稳踏上秤面，保持身体平衡，使双脚平均分担体重。等您站稳后，秤会显示您的体重。重量闪烁2次后自动锁定画面，10秒后自动关机。

屏幕显示：



秤体在待机画面时，任何时候都能进行体重测量。无需烦恼更换电池的问题。

功能展示

出错提示



超载显示符号：
称量超出最大范围时显示“Err”。






状况显示符号：
开机不稳定时显示“unst”。

单位转换



单位为：**kg - lb**
称重前请先设置好单位，称重进行时不能进行单位转换。

电池装拆

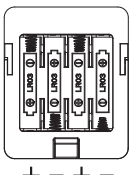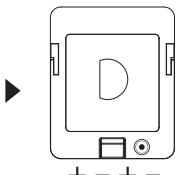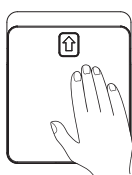

往箭头方向轻推电池门即可打开；
请按照电池箱里面的正负极符号安装4颗AA电池。
(电池的极性装反可能会对本产品的电子部分造成永久损害)。

注意事项

- 请勿在本产品上堆放重物。
- 本产品宜水平放置，不宜竖直放置。
- 称重时请保持身体平稳，尽量避免晃动身体。
- 所称物体请勿超过最大秤量值，过重可能会损坏产品传感器。
- 新旧电池请勿混合使用，请勿使用充电式电池。
- 请勿使用化学溶剂擦拭本产品，如需清洁请用沾水湿布擦拭，秤体内部不能湿水。
- 为确保本产品的使用寿命，请勿将本产品放置在过度湿热的环境中。
- 如本产品开机时无显示，请检查电池是否接触不良或是否需要更换新电池。
- 本产品只可做家庭称体重之用，不得用于商业或其它用途。
- 本产品仅受静压力。非正常使用并受到撞击或跌落，容易损坏本产品且造成危险。
- 基于技术持续改进，产品外观或会更改，请以实物为准，更改内容恕不另行通知。